

Elektriske rullestoler

Elektrisk ståfunksjon



permobil

Stå uten kompromiss

Ståfunksjonen gjør deg mer uavhengig og reduserer risikoen for sekundære komplikasjoner som er forbundet med langvarig sitting i rullestol. Permobil's elektriske stårullestoler gjør at du kan bruke ståfunksjonen til daglige aktiviteter, som å kjøre mens du står, ved sosiale anledninger, på arbeid og skolesammenhenger, for å ivareta den mentale helsen og livskvaliteten på best mulig måte. Med fullt programmerbare ståsekvenser som gjør at posisjonen kan optimaliseres ved hjelp av teknikker for liggende, delvis tilbakelent eller sittende til stående stilling.



M Corpus® VS

Ståfunksjon med midthjulsdrift

M Corpus VS kombinerer en kompakt base og fjæring som gir stabilitet, trekkraft og kjørekomfort for å sørge for en førsteklasses elektrisk ståfunksjon på en midthjulsdriven rullestol M Corpus VS er designet med brukeren i tankene, og gjør det enkelt å justere ståekvensen og posisjonen etter dine behov.

— Tilgjengelig for både F5 Corpus VS og M Corpus VS

— Kun tilgjengelig på bestemte stoler

Funksjonelle kjørehastigheter i stående stilling

Stående og aktiv høyde
0–300 mm

Fullstendig tilpassbare ståekvenser

Mulighet for utsvingbare knestøtter eller fast knestøtte med én holder



F5 Corpus® VS

Ståfunksjon med fronthjulsdrift

F5 Corpus VS har uavhengig støtdemping på alle hjul som gir komfort, trekkraft og stabilitet, spesielt nyttig ved aktiv kjøring utendørs. Enkel justering av ståsekkvensene gjør at posisjonen kan optimaliseres, mens det lette, utsvingbare knestøtten gir bedre komfort og fleksibel oppbevaringsplass på rullestolen for større uavhengighet.

Justerbar
bryststøtte

Komplett utvalg av elektrisk
setejustering, tilt, ryggstøtte,
beinstøtte og seteløft

Stående og aktiv høyde
0-350 mm

Lave, funksjonelle
sete-til-gulv-høyder

Bevegelig elektrisk fotplate




Designet for uavhengighet

Siden designet veier lite, kan våre utsvingbare knestøtter flyttes og håndteres uavhengig ved hjelp av den lett tilgjengelige utløsermekanismen, selv med begrenset håndfunksjon. Det er enkelt å finjustere plasseringen av puten med det integrerte BOA®-hjulet* for optimal passform og komfort etter dine individuelle behov.

Puten finnes i to størrelser, så du kan velge det alternativet som passer best for deg.

*BOA® Fit System leverer en mikro-justerbar, presis passform ved hjelp av et brukervennlig hjul

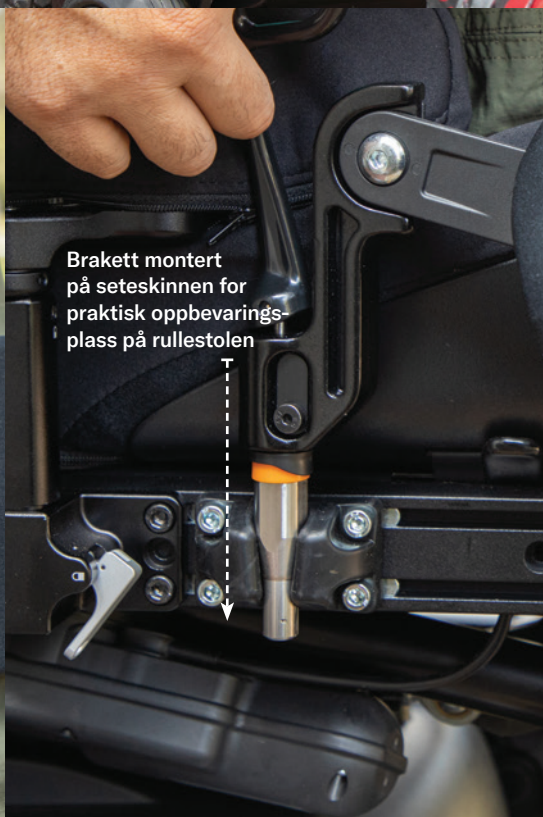

Det å stå gjør samhandling ansikt til ansikt enklere og fremmer bedre helse.

Effekten elektriske stårullestoler kan ha omfatter flere helsemessige fordeler, samt hvilke aktiviteter du kan delta i og hvor uavhengig du er.


Fordelene ved bruk av elektrisk stårullestol som støttes av dokumentasjon av høy kvalitet, inkluderer:

- trykkavlastning
- blære, tarm, fordøyelsesfunksjoner
- bevegelse og muskellengde
- aktiviteter i dagliglivet, personlig/medisinsk pleie og fritidsaktiviteter
- funksjonell rekkevidde
- kommunikasjon
- deltakelse i sosiale, arbeidsmessige og undervisnings-sammenhenger
- uavhengighet

Referanse: Noojien C, Ostendorf P, Bernstein J (2023) Permobil White Paper: A summary of the evidence on power standing wheelchairs



Ingen behov for ekstra maskinvare

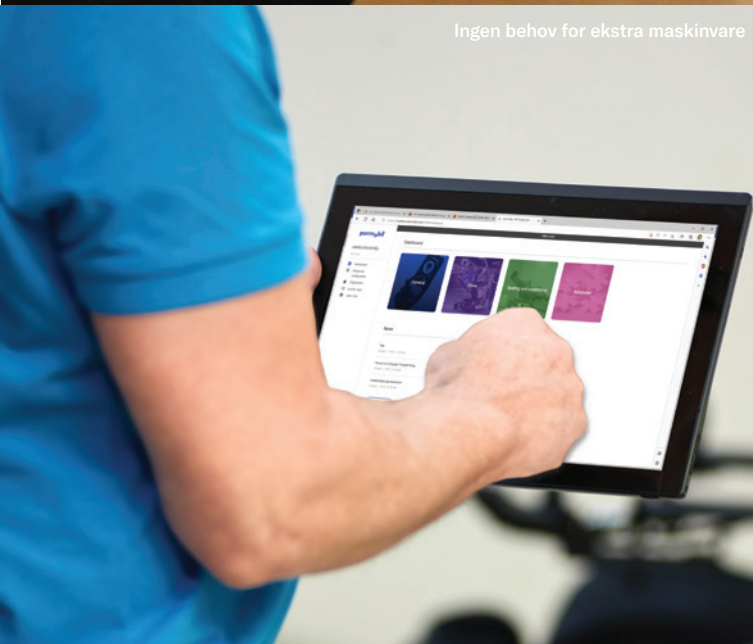

Enkel programmering

Programmeringsendringene går raskere og mer intuitivt med QuickConfig, den nye trådløse programmeringsappen for Permobils elektriske rullestoler utstyrt med Power Platform. Utviklet for serviceteknikere, klinikere og leverandører som tilbyr en enklere måte å konfigurere parameterinnstillingene. Appen har et intuitivt grensesnitt for å sette opp F5 Corpus VS og M Carpus VS med brukerens foretrukne kjøre- og seteegenskaper og ståsekvens.

Skann for å
finne ut mer



Kan lastes ned fra
App Store og Google Play



App Store er et varemerke som tilhører Apple Inc. Google Play er et varemerke som tilhører Google LLC.

permobil

permobil.no

GR3903-0.1NO230620